

Die MELAG Euroklav[®] Serie

Die preiswerten »Klasse S« Autoklaven



500.000 MELAG Geräte weltweit

Qualität, auf die Sie zählen können.

Auf der ganzen Welt profitieren Praxen und Kliniken von der herausragenden Qualität - made in Germany. Verlassen Sie sich auf die dauerhaft zuverlässigen und leistungsstarken MELAG Autoklaven.

Weitere Praxen in Ihrer Region finden Sie auf: www.melag.com/referenzen



„Der zuverlässige MELAG Autoklav bringt uns große Zeitersparnis und maximale Sicherheit für Patienten und Team.“

Praxis Frank Bachmann, Deutschland



„Die Anschaffung der MELAG Systemlösung war die richtige Entscheidung, um Zeit und Geld bei der Aufbereitung zu sparen.“

28CliniC, Japan



„Mit unserem MELAG Autoklaven bieten wir höchsten Schutz für unsere treuen Freunde: Die Haustiere!“

Veterinärpraxis Animalogic, Spanien



„MELAG Autoklaven - die beste Wahl für das Wohl und die Sicherheit unserer Patienten.“

Praxis Sakala Hambaravi, Estland



„MELAG garantiert erstklassige Qualität und höchste technologische Standards.“

First Private Dental Center, Ukraine



„Mit MELAG haben wir einen starken Partner für höchste Hygienestandards und optimale Workflows.“

Sparkle Dental Boutique, Abu Dhabi



„Aufgrund der Zuverlässigkeit, Service-Freundlichkeit und den geringen Folgekosten haben wir uns für MELAG entschieden.“

Platinum Orthodontics, Ghana



„Mit dem MELAG System erreichen wir schnelle und sichere Aufbereitungsprozesse.“

Prosthodontic Associates, Australien



Die Euroklav® Serie

Einzigartig in Preis und Leistung.

Mit der schnellen und zuverlässigen Euroklav® Serie bieten wir eine noch preiswertere Alternative für Praxen und Kliniken, die wegen der verwendeten Instrumente keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Die Klasse S MELAG Autoklaven sterilisieren mit einem effektiven Vor-Vakuum in Verbindung mit einem fraktionierten Strömungsverfahren sogar verpackte Instrumente mit einfachen Hohlkörpern.

Verlassen Sie sich auf unsere innovativen Lösungen für die Instrumenten-Aufbereitung. Auf der folgenden Seite erhalten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile:



Erfahrung:
Spezialisierung
seit 1951



Vertrauen:
Über 500.000 ausgelieferte
MELAG Geräte



Qualität:
Made in Germany



Innovation:
450 spezialisierte
Mitarbeiter/-innen in Berlin



Systemlösung:
Instrumenten-Aufbereitung
aus einer Hand



Die Produkt-Highlights:

Performance

Kurze Zykluszeiten und effektive Vakuum-Schnelltrocknung ermöglichen effiziente Workflows.



Sicherheit

Die integrierte Schnittstelle zur Dokumentation bietet maximale Prozesssicherheit.



Flexibilität

Stimmen Sie die Kesseltiefe sowie die Art der Wasserversorgung perfekt auf Ihren Praxisbedarf ab.



Benutzerfreundlichkeit

Das MELAG 4-Tasten-Konzept und die digitalen Tools sichern ein intuitives Bedienkonzept.



Entdecken Sie die Produkt-Highlights in unserem Video:
www.melag.com/mediathek



Abgestimmt auf Ihren Workflow:

Euroklav® 23 VS+

Stand-alone
Autoklav mit
45 cm Kesseltiefe



Euroklav® 29 VS+

Stand-alone
Autoklav mit
35 cm Kesseltiefe



Sparen Sie noch mehr Zeit und Geld:

Mit einer optionalen MELAdem® Wasseraufbereitungs-Anlage profitieren Sie von einer Arbeitersparnis durch die automatisierte Wasserver- und -entsorgung.

Die Produkt-Highlights der Euroklav® Serie

Diese Vorteile sind einzigartig.

Gewinnen Sie mehr Zeit für die Behandlung Ihrer Patienten. Wir haben bei der Entwicklung der Euroklav® Serie von der ersten Minute auf effiziente und sichere Praxis-Workflows geachtet. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der kurzen Betriebszeiten, der intuitiven Bedienung und der vielfältigen Dokumentationsmedien unserer stand-alone Autoklaven der Klasse S:



Performance

Schnelle Sterilisationsprozesse in Ihrer Praxis: Unverpackte Instrumente können Sie im **Schnell-Programm inklusive einfachem Vor-Vakuum nach nur 15 Minuten*** entnehmen. Verpackte Instrumente werden – je nach Gesamtbeladung des Autoklaven – in nur 25 Minuten* sterilisiert.

Zur optimalen Nutzung der Sterilisierkammer stehen Ihnen vielfältig nutzbare Einsatzgestelle zur Verfügung. Das abgestimmte Zubehör garantiert eine **optimale Beladung** des Autoklaven mit bis zu **4 kg**.

* Angaben ohne Trocknung



Sicherheit

Für maximale Sicherheit überwachen die MELAG Autoklaven alle relevanten **Prozessparameter mit einer hochpräzisen Mikroprozessor-Steuerung**. Die Protokolle sind rechtssicher und werden einfach über eine Schnittstelle ausgelesen.

Die **abgestimmten Dokumentationsmedien bieten Ihnen höchste Flexibilität**. Gestalten Sie mit MELAflash CF-Card Printer, MELAnet Box, MELAprint® 44 oder der Freigabesoftware MELAtrace® den Dokumentationsprozess nach Ihren Vorstellungen.



Flexibilität

Ein System – Zwei Autoklaven: Um den unterschiedlichen Anforderungen an die zu sterilisierenden Instrumente gerecht zu werden, bieten wir Ihnen zwei Kammergrößen: Euroklav® 29 VS+ mit 17 Litern und Euroklav® 23 VS+ mit 23 Litern.

Die stand-alone Autoklaven sind mit den integrierten Vorratsbehältern und der patentierten Luftkühlung absolut standortunabhängig und schnell installiert. Mit Hilfe einer zusätzlichen MELAG Wasseraufbereitungs-Anlage erfolgt die Wasserversorgung zeitsparend voll automatisch.



Benutzerfreundlichkeit

Die einfache Bedienung der Euroklav® Serie mit dem **bewährten MELAG 4-Tasten-Konzept** schenkt Ihnen mehr Zeit für Ihre Patienten. Denn das intuitive Bedienkonzept reduziert den Arbeitsaufwand und vermeidet Anwendungsfehler bei der Sterilisation.


Mit unseren **digitalen Tools bringen Sie die Instrumenten-Aufbereitung auf ein noch höheres Level**. Entdecken Sie unsere multimedialen Inhalte auf der MELAG Website.

Digitale Tools für smarte Workflows


Profitieren Sie von unseren Vertriebsmitarbeitern in Ihrer Region und von den digitalen Tools auf unserer Website.



Mediathek:
Über 300 Videos zur sicheren Instrumenten-Aufbereitung:
www.melag.com/mediathek

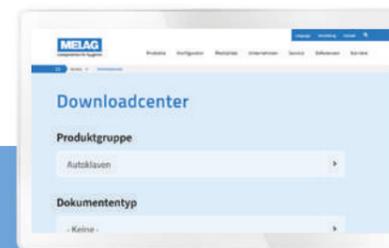

Downloadcenter:
MELAG Dokumente überall und jederzeit abrufen:
www.melag.com/service/downloadcenter

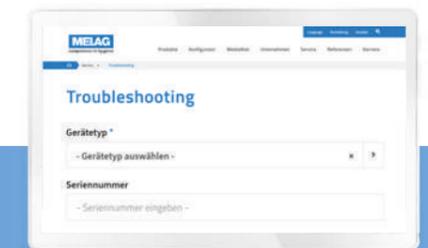

Troubleshooting:
Geben Sie Störungsnummern ein und erhalten Sie direkt Lösungen:
www.melag.com/service/troubleshooting

Die MELAG Systemlösung

Für Ihre Sicherheit: Alles aus einer Hand.

Die Euroklav® Autoklaven sind ein wichtiger Bestandteil der RKI-konformen Instrumenten-Aufbereitung. Durch das perfekte Zusammenspiel der MELAG Systemlösung erreichen Sie noch effizientere Arbeitsabläufe und höchsten Schutz für Patienten und Team.

Profitieren Sie von den **Vorteilen der MELAG Systemlösung** mit Produkten des führenden Herstellers für die Praxis-Hygiene:



Persönlich:
Ein zentraler Ansprechpartner
bei Rückfragen



Effizient:
Kostenoptimierung durch
Synchronisierung des Service



Prozessoptimiert:
Workflow und Bedienung
aufeinander abgestimmt

Steigern Sie die Qualität der Instrumenten-Aufbereitung: MELAtherm® 10 Thermodesinfektoren für die zeitsparende Reinigung und Desinfektion, MELAseal® Siegelgeräte für sicheres Verpacken der Instrumente und MELAtrace® als bedienerfreundliche Software für die Dokumentation und Freigabe bieten in Verbindung mit einem MELAG Autoklaven ideale Workflows in Praxis und Klinik.



*in Verbindung mit MELAtrace®

Prozess der Instrumenten- Aufbereitung:



✓ Reinigung und Desinfektion mit MELAtherm®



✓ Verpackung mit MELAseal®



✓ Sterilisation mit Euroklav®



✓ Dokumentation und Freigabe mit MELAtrace®



✓ Kennzeichnung mit MELAprint® 60*

Perfektion bis ins Detail

Konfigurieren Sie Ihren Euroklav®.

Nutzen Sie das maximale Potenzial der Euroklav® Serie: Mit dem vielfältigen Zubehör und den ergänzenden Produkten der MELAG Systemlösung stimmen Sie die Prozesse auf Ihre Ansprüche ab und erzielen somit beste Ergebnisse bei der Instrumenten-Aufbereitung.



Beladungssystem

Für die optimale Nutzung der Sterilisierkammer bieten wir Beladungssysteme für jede Anwendungsfall.



Halterung A Plus
zur Aufnahme von fünf Tablett für Einzel-Instrumente
Art.-Nr. 82620 für Euroklav® 29 VS+
Art.-Nr. 82630 für Euroklav® 23 VS+



Halterung D
zur Aufnahme von zwei größeren Sterilisierbehältern
Art.-Nr. 46840 für Euroklav® 29 VS+ und Euroklav® 23 VS+



Sterilisierbehälter
sind für optimale Sterilisations- und Trocknungsergebnisse im Boden und Deckel gelocht. Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an Sterilisierbehältern:
www.melag.com/de/produkte/sterilgutlagerung/



Folienhalter
garantieren optimale Trocknungsergebnisse durch das senkrechte Sterilisieren der verpackten Instrumente
Art.-Nr. 22410 für Euroklav® 29 VS+
Art.-Nr. 22420 für Euroklav® 23 VS+



Dokumentation

Die Euroklav® Serie bietet eine rechtssichere Dokumentation und Freigabe mit modernen Ausgabemedien.



MELAttrace®
zur professionellen Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung des gesamten Aufbereitungsprozesses
MELAttrace® ohne Beladungsverwaltung: Art.-Nr. 21128
MELAttrace® Pro mit Beladungsverwaltung: Art.-Nr. 21138



MELAnet Box
überträgt alle Protokolle automatisch auf den Computer und in das Praxis-Netzwerk
Art.-Nr. 40296



MELAflash CF-Card Printer
speichert alle Protokolle des Autoklaven einfach und sicher auf einer CF-Karte
Art.-Nr. 01039



MELAprint® 44
druckt die Protokolle des Autoklaven in Papierform aus
Art.-Nr. 01144



Wasseraufbereitung

MELAdem® Wasseraufbereitungs-Anlagen liefern hochwertiges demineralisiertes Wasser zum optimalen Werterhalt des Autoklaven und zum Schutz der Instrumente.



MELAdem® 40
ist eine Ionenaustauscher-Anlage für Praxen mit bis zu drei Sterilisationszyklen pro Tag
MELAdem® 40: Art.-Nr. 01049
Anschluss-Set: Art.-Nr. 09031



MELAdem® 47
ist eine leistungsfähige Umkehr-Osmose-Anlage für Praxen mit einem erhöhten Sterilisationsbedarf
MELAdem® 47: Art.-Nr. 01047
Anschluss-Set: Art.-Nr. 09032



MELAdem® 53 / 53 C
ist eine Wasseraufbereitungs-Anlage mit hoher Kapazität für MELAtherm® und bis zu drei weiteren Geräten
Art.-Nr. 01038



MELAJet®
ermöglicht das Ab- und Durchspülen der Instrumente mit demineralisiertem Wasser*
Art.-Nr. 27300

*Kompatibel mit MELAdem® 40 und MELAdem® 53 / 53 C

Technische Daten

Zahlen und Fakten auf einen Blick.

Programme		Euroklav® 23 VS+ Euroklav® 29 VS+	Trocknungszeit
Schnell-Programm S*	134°C, Haltezeit: 3,5 Min.	15 Min.	10 Min.
Universal-Programm	134°C, Haltezeit: 5,5 Min.	25 Min.	25 Min.
Schon-Programm	121°C, Haltezeit: 20,5 Min.	40 Min.	25 Min.

* Nur für unverpackte Instrumente

	Euroklav® 23 VS+	Euroklav® 29 VS+
Artikel-Nummer	10056	10057
Gerätetyp	Stand-alone (mit zusätzlicher Wasseraufbereitungs-Anlage kompatibel)	
Kesselgröße	45 cm lang x Ø 25 cm	35 cm lang x Ø 25 cm
Kesselvolumen*	23 Liter	17 Liter
Beladungsmenge	4 kg Instrumente 1 kg Textilien	3 kg Instrumente 0,8 kg Textilien
Geräteabmessungen (B x H x T)	42,5 x 49 x 70 cm Gerät passt auf 60 cm Tischplatte	42,5 x 49 x 62 cm Gerät passt auf 50 cm Tischplatte
Gewicht	45 kg	42 kg
Stromversorgung	220-240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	2.300 Watt	2.100 Watt

* Literangaben gerundet

Systemlösungen, Innovation und Qualität

Wir sind ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 1951 auf Produkte für die Praxishygiene konzentriert. Wir produzieren mit über 450 Mitarbeitern/-innen ausschließlich in Deutschland auf ca. 25.000 m² und sind Weltmarktführer im Bereich der Instrumenten-Aufbereitung.



MELAG
competence in hygiene

Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG Medizintechnik