



Leonardo DR pico

Phantastisch leichte Röntgentasche mit Detektor & Notebook


Komfortable, stabile Röntgentasche – auch als Umhängetasche oder als Rucksack geeignet – nur mit Röntgendetektor und Notebook

Das 17"-Notebook und der Röntgendetektor 30 x 24 cm (12" x 10") mit Protectionbox sind sehr platzsparend und gut gepolstert in der robusten Tasche untergebracht. Mit einem Komplettgewicht von nur ca. 7,1 kg ist ein bequemer Transport des Leonardo DR pico zu jedem Einsatzort möglich. Die handliche Röntgentasche ist auch für den stationären Gebrauch in der Tierarztpraxis oder Pferdeklunik geeignet. Mit einem batteriebetriebenen, tragbaren Röntngengenerator (ab ca. 6,8 kg) können Sie das System komplettieren. Einfache Handgriffe genügen und die Röntgenlösung ist schnell vor Ort aufgebaut und einsatzbereit.

Die einfache Bedienung der auf dem Notebook vorinstallierten Akquisitions- und Befundsoftware von Oehm und Rehbein ermöglicht auch radiologisch weniger erfahrenem Personal ein einfaches, intuitives Arbeiten. Optimale Röntgenbilder sind so garantiert. Darüber hinaus unterstützt der integrierte Röntgenhelfer anhand von Hinweisen, Fotos und Beispielbildern bei der richtigen Positionierung des Patienten beim Röntgenvorgang.

Das Leonardo-System ist in dieser Variante verfügbar:

- **Leonardo DR pico 1210:** mobiles System mit kabellosem Detektor (wireless) im Format 30 x 24 cm (12" x 10")

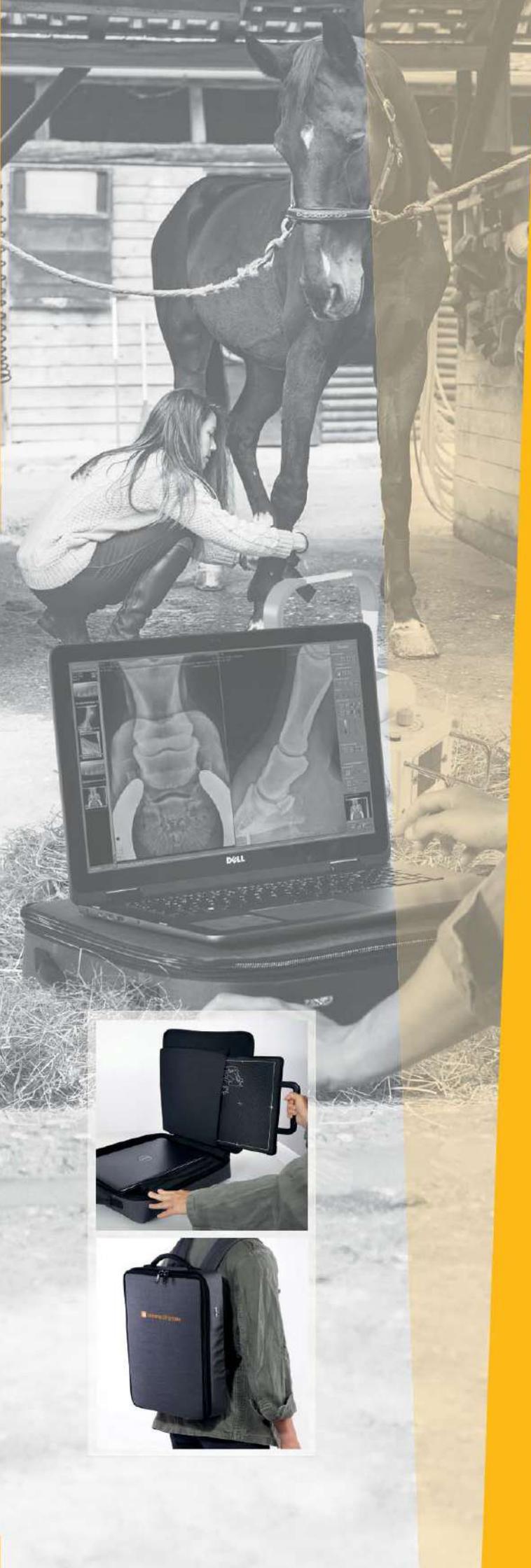

Systemvorteile

Kabellos: schnelle Betriebsbereitschaft und stolperfreies Röntgen

Leicht: mit nur ca. 7,1 kg einfach zu transportieren – platzsparende Unterbringung aller Systemkomponenten (Ersatzbatterien, Kabel etc.) in einer raffinierten, stabilen Tasche

Schnell: zügiger Aufbau – einfache Handgriffe genügen und die Röntgenlösung ist schnell vor Ort aufgebaut und einsatzbereit

Tadellos verpackt: Ordnung und sicherer Transport – Komponenten werden in passgenauen, separat zu schließenden Fächer verstaut, umlaufendes robustes Dämmmaterial wirkt stoßdämpfend

Exzellent: hochwertiger Röntgendetektor auf Basis eines Cäsium-Jodid (CsI) Szintillators – beste Bildqualität auch bei niedrigen Röntgendosiswerten

Bedienerfreundlich: selbsterklärende Oehm und Rehbein-Akquisitionsoftware *dicomPACS®DX-R* inklusive kostenlos nutzbarer Spezialmessfunktionen

Schnell: Kurz nach dem Auslösen (6 bis 8 Sekunden) steht die Röntgenaufnahme bereits zur Verfügung


Ferngesteuert: Komfortables Arbeiten mit *dicomPACS®DX-R remote control* – Ihr Smartphone als Fernbedienung für die Aufnahme und Betrachtung von Bildern während des Röntgenvorganges (optional)

Durchdacht: integrierter Röntgenhelfer – getrennt nach Tiergattung (Katze, Hund und Pferd)

Erreichbarkeit: integrierte Befundsoftware bietet einen weltweiten, schnellen und kostengünstigen Informationsaustausch (per *ORCA®* Cloud oder E-Mail)

Einzigartig: Spezialvermessungsfunktionen, wie z. B. HD-Vermessung, TTA, TPLO und Herzvermessung, als auch Makros für immer wiederkehrende Untersuchungsabläufe

Gut dokumentiert: professionelle Software zur ausführlichen und lückenlosen Dokumentation von Röntgenleistungen bei Pferde-Kaufuntersuchungen gemäß „Röntgenleitfaden 2018“ (optional)

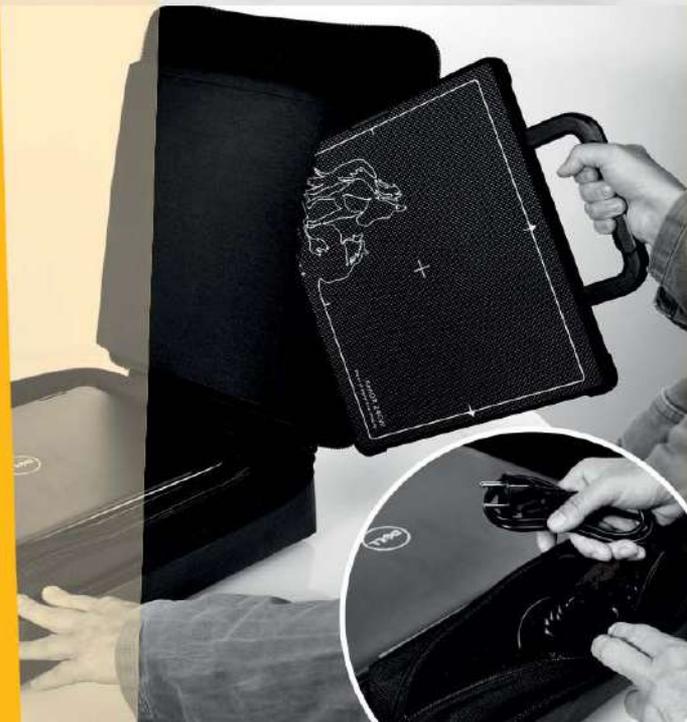



Nur ca.
7,1 kg

Maße



Gut verpackt:

- Ausreichend Platz für Notebook und 30 x 24 cm (12" x 10")-Detektor mit oder ohne Detektor-Schutzhülle
- Außenmaße ca. 40 x 46 x 9 cm
- Stark gepolstert inkl. stabilem Schutzrahmen
- Wasserabweisend – bietet Sicherheit bei Regen
- Leicht zu säubernde, folierte Schutzschicht auf der Rückseite der Tasche
- Aufbewahrungsfächer für Notebook, Maus, Batterien, Netzteil, etc.
- Zusätzliche Tasche für Zubehör, beispielsweise Ladegerät und Ladekabel
- Inklusive zwei Schulterriemen (die Riemen können verstaut werden) und leicht abnehmbarem Trageriemen



Ein Produktvideo zum Leonardo DR pico-System finden Sie unter www.oehm-rehbein.de/leonardo-pico-video



Ausführliche Informationen zum Leonardo DR pico finden Sie unter www.oehm-rehbein.de

Vorteile der professionellen Akquisitionsoftware

- Moderne grafische Bedienoberfläche (GUI) – adaptierbar für nahezu **beliebige Sprachversionen**, per **Touchscreen** bedienbar – das garantiert ein schnelles und effizientes Arbeiten und einen optimalen Arbeitsablauf
- Übernahme der Patientendaten über **DICOM Worklist**, **BDT/GDT**, HL7 oder andere Protokolle – eine manuelle Erfassung ist ebenfalls möglich
- Verwendung von **DICOM Procedure Codes** zur Übergabe aller relevanten Daten für eine Untersuchung direkt aus dem angeschlossenen Patientenmanagementsystem (HIS/RIS)
- **Freie Konfiguration** der im System bereits enthaltenen Körperregionen (Bodyparts) mit mehr als **200 Projektionen** und unzähligen Einstellungsvarianten für den Bereich der Veterinärmedizin
- Sichere und schnelle **Erfassung von Notfallpatienten** sowie **Wechsel zwischen den geplanten Untersuchungen** eines Patienten möglich, damit dieser ggf. weniger häufig umgelagert werden muss
- Ermöglicht das **nachträgliche Hinzufügen von Aufnahmen** zu einer Untersuchung, auch wenn diese bereits abgeschlossen ist
- Spezielle Funktionen für den Veterinärbereich, wie z. B. eine besondere Erfassungsmaske für Patienten- und Halterdaten, integrierte **MMP- und HD-Vermessung**, **spezielle Bildfilter**, **TPLO**, **TTA**, **Herzvermessung nach Buchanan**, **Distractionsindex**, **Multi-Generatorbetrieb** für den Wechsel zwischen mobilen und stationären Röntgenanlagen und vieles andere mehr...
- Voll **integrierter, multimedialer Röntgenhelfer** zur richtigen Einstelltechnik für jede Untersuchung im Veterinärbereich inkl. vieler Hinweise, Fotos und korrekter Röntgenbilder
- **Berichtsmodul für Röntgenleistungen von Pferde-Kaufuntersuchungen** für eine schnelle Erstellung der Berichte durch automatische Übernahme der Röntgenbilder und Breitstellung der Befundtexte (optional)



Standard-Komponenten des **Leonardo DR pico**

Transporttasche inklusive Zubehör

- Für 30 x 24 cm (12" x 10")-Detektoren mit Protectionbox
- Außenmaß ca. 40 x 46 x 9 cm
- Gepolstert und mit stabilem Schutzrahmen inklusive zwei Schulterriemen zum bequemen Tragen auf dem Rücken
- Mit einem abnehmbarem Trageriemen
- Wasserabweisend - bietet Sicherheit bei Regen
- Alle wichtigen Zubehörteile verfügen über passgenaue, separat zu schließende Fächer



Notebook

Intel® i7 Prozessor, 16 GB RAM DDR, 512 GB SSD,
43.9 cm (17,3") Touch-Display, 1920 x 1080 Auflösung,
USB 3.0, Wireless-LAN 802.11 a/b/g/n



Direktradiographie-Detektor

24 x 30 cm (10" x 12") kabellos

Kabellos röntgen!

Passt ohne Modifikationen in bestehende Buckylade (konform der Röntgenfilmkassette)



Akkuladegerät inkl. Akkus

- Schnell ladende langlebige Akkus inkl. Akkuladegerät
- Ladezeit Batterie: 3 Stunden



Leonardo DR pico-Softwarepaket

mit dicomPACS®DX-R, der professionellen Konsolensoftware mit moderner grafischer Bedienoberfläche mit Basis-Softwareausstattung und integriertem Röntgenhelfer zur korrekten Einstelltechnik für jede Untersuchung, inklusive:

- dicomPACS®DX-R DICOM Senden SCU
- dicomPACS®DX-R DICOM Patienten-CD
- dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing



Optionale Komponenten für das Leonardo DR pico-System

dicomPACS®DX-R remote control

App für Smartphone als Fernbedienung für die Aufnahme und Betrachtung von Bildern während des Röntgenvorganges

Halterungen für Smartphone (Apple)

Zwei Halterungstypen für die Aufnahme und Betrachtung von Bildern stehen zur Auswahl:

- Armhalterung
- Halterung für den tragbaren Röntgenerator



Schutzgehäuse mit Handgriff

Robustes Gehäuse enthält mehrere Schutzschichten und eine umlaufende Gummieinfassung, um Stöße zu absorbieren und die Belastungskapazität zu erhöhen



Amadeo P Hochfrequenz-Röntgeneräte

Tragbare Monoblock-Röntgeneräte für hochwertige Röntgenaufnahmen: Geringes Gewicht und einfache Bedienung garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Kleintierpraxis und Pferdeklinik



Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Oehm ^{plus} Rehbein

www.oehm-rehbein.de | X-perts in X-ray



Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

Kabellose
Freiheit!



[Stempel Vertriebspartner]