
Soprano Titanium

Stärker, Schneller, Smarter

Haarentfernung - **NEU DEFINIERT**





Wir präsentieren: **Soprano Titanium**

Die bahnbrechende Plattform zur Haarentfernung, welche ultimative Funktionalität mit unvergleichlichem Komfort verbindet. Dank des 4 cm² großen Spots und des modernen zweifachen Kühlsystems können Behandlungen jetzt viel schneller und äußerst schmerzarm durchgeführt werden - eine deutliche Verbesserung für Anwender wie Kunden gleichermaßen.

Soprano Titanium nutzt die Vorteile von drei kombinierten Wellenlängen, einem angenehmeren Behandlungserlebnis und einem geschäftsorientierten Ansatz, was neue, einzigartige und ergebnis-orientierte Möglichkeiten in der Welt der professionellen Haarentfernung eröffnet.

Die **System Highlights** des Soprano Titaniums



Extrem große Spotgröße

Deutlich schneller!

Soprano Titanium verfügt über Quattro 3D, ein einzigartiges und effizientes neues Handstück mit einer besonders großen Spotgröße von 4 cm². Dieser bahnbrechende Applikator macht die Behandlung wesentlich schneller und schmerzärmer, verkürzt die Behandlungszeiten erheblich und sorgt für ein angenehmeres Behandlungserlebnis beim Kunden.



Doppelanschluss

Mehr Flexibilität. Weniger Aufwand.

Soprano Titanium ist die erste Version der Soprano Haarentfernungssysteme, die über zwei Anschlüsse verfügt, so dass jederzeit zwei verschiedene Handstücke an die Plattform angeschlossen werden können. Diese Funktion ermöglicht mehr Flexibilität und erspart gleichzeitig den Zeitaufwand für den Wechsel des Applikators, wenn verschiedene Areale behandelt werden.



✓ ICEPlus⁺

Kontinuierliche Kontaktkühlung

Die moderne ICE Plus™ Technologie sorgt dafür, dass die Haut kontinuierlich gekühlt wird und die Temperatur während der gesamten Behandlung stabil bleibt. Die kalte Saphirspitze der ICE Plus™ Kühlung minimiert das epidermale Risiko, gleichzeitig bleibt die Wärme in der Dermis, in der die Haarfollikel behandelt werden, was die Wirkung der Diode unterstützt. Der Kunde genießt nun während der gesamten Sitzung ein völlig schmerzarmes, kühles und komfortables Behandlungserlebnis.

✓ 15 Zoll Bildschirm

Benutzerfreundlich und funktional

Der Soprano Titanium ist mit einem neuen großformatigen 15 Zoll Touch-Screen ausgestattet. Mit voreingestellten Parametern profitieren Anwender von einer intuitiven, benutzerfreundlichen Arbeitsumgebung.





Synergien nutzen. **Überragende Ergebnisse.**


SHR™ Technik

SHR™ - Die von Alma entwickelte Haarentfernungsinnovation ist die einzige klinisch erprobte Methode der Laserhaarentfernung, die praktisch schmerzfrei ist. Dabei ist sie zudem die sicherste Laserhaarentfernungsmethode für alle Hauttypen, einschließlich dunkler und leicht gebräunter Haut. Die einzigartige allmähliche Erwärmung und die schnelle Pulsabgabe schädigen effektiv die Haarwurzel und stoppen deren weiteres Wachstum. Gleichzeitig werden Verletzungen des umgebenden Gewebes verhindert. SHR™ wirkt mit seiner einzigartigen Methode so auf das Melanin der Haut, dass das Verfahren bei allen Hauttypen zu jeder Jahreszeit sowie bei leicht gebräunter Haut durchgeführt werden kann.

3D Technologie



Mit seiner exklusiven 3D-Technologie kombiniert Soprano Titanium die drei effektivsten Laserwellenlängen in einem einzigen Applikator und zielt gleichzeitig auf unterschiedliche Gewebetiefen und anatomische Strukturen innerhalb des Haarfollikels ab. Durch die Kombination der Absorptions- und Penetrationsebenen verschiedener Wellenlängen, zusammen mit einem vergrößertem Behandlungsareal, erhöhtem Komfort und geringerem Wartungsaufwand, ist Soprano Titanium die sicherste und effizienteste Haarentfernungsbehandlung, die aktuell erhältlich ist. Eine 3-Dimensionale Technologie für eine einzigartige Haarentfernungslösung.

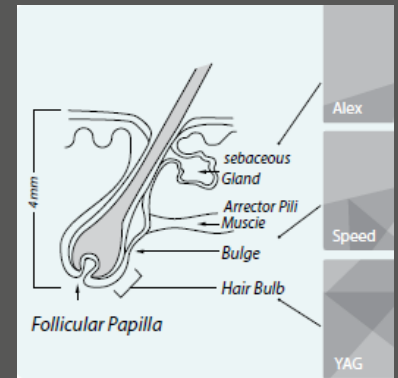

ALEX 755nm

Die Alexandritwellenlänge wird besonders stark im Melanin der Haare und Haarwurzeln absorbiert und ist somit ideal für die umfangreichste Palette von Haarfarben und -typen, insbesondere hellere und dünne Haare. Mit vorwiegend oberflächlicher Eindringtiefe zielt die Wellenlänge von 755 nm auf die Ausbuchtung des Haarfollikels ab und ist besonders effektiv bei oberflächlich eingebettetem Haar.

SPEED 810nm

Die 810 nm ist eine klassische Haarentfernungswellenlänge, die tief in die Haarfollikel eindringt. Das Speed-Handstück verfügt über eine hohe durchschnittliche Leistung sowie eine schnelle Wiederholrate. Die Spotgröße von 2 cm² bietet eine zeiteffiziente Behandlung. Die Wellenlänge von 810 nm hat eine moderate Melaninabsorption und ist daher auch für dunklere Hauttypen geeignet. Sie ist aufgrund der mittleren Eindringtiefe in das Gewebe passend für Behandlungsareale wie Arme, Beine, Wangen und Kinn.

YAG 1064nm

Die Wellenlänge des Nd:YAG-Lasers von 1064 nm zeichnet sich durch eine geringere Melaninabsorption aus und ist somit die perfekte Lösung für besonders dunkle Hauttypen. Die 1064 nm erzielen die tiefste Durchdringung des Haarfollikels, so dass sie auf den Haarwulst und die Papille abzielen, wo sie verankerte Haare in Bereichen wie Kopfhaut, Achseln und Schambereich besonders gründlich behandeln. Die Verwendung der 1064 nm Wellenlänge erhöht durch die größere Wasserabsorption zwar den Wärmegrad der Gesamtbehandlung, führt aber dadurch zu einer hochwirksamen Haarentfernung und zu verbesserten Ergebnissen.

Die Handstücke des **Titaniums**



4Quattro

3D und deutlich schneller!

Dieser exklusive Applikator ist ein wertvolles Hilfsmittel für jedes Studio. Mit seiner großen 4 cm² Spotgröße und den drei integrierten Wellenlängen ermöglicht dieses Handstück die Behandlung eines noch größeren Areals, dies verkürzt die Behandlungszeit deutlich und macht die Anwendung für den Kunden einfacher und schneller. Mit Quattro ist die Haarentfernung schnell, effizient und bequem.



TRIO - Drei in Einem

Dieses Handstück verfügt über eine Spotgröße von 2 cm² und drei hochwirksame Wellenlängen in einem Applikator. Es zielt gleichzeitig auf unterschiedliche Gewebetiefen und anatomische Strukturen innerhalb des Haarfollikels ab und erhöht so die Behandlungseffizienz.



Spotgröße 2 cm²

**SPEED™ 810 -
Auf dem neuesten Stand**

Mit diesem großflächigen Applikator können Sie mehr Behandlungen in kürzerer Zeit durchführen, größere Bereiche schneller behandeln und gleichzeitig Kunden ein sicheres und hochwirksames Haarentfernungsverfahren anbieten.



Spotgröße 1,5 cm²

**DIODENLASER ALEX 755 -
Die Kraft der Vielfalt**

Die starke Absorption im Melanin, kombiniert mit kontinuierlicher Kühlung, Behandlungsabdeckung, Komfort und geringer Wartung, ermöglicht die Behandlung einer Vielzahl von Haartypen und -farben, insbesondere hellerem und dünnem Haar.



Spotgröße 1 cm²

**COMPACT 810 -
Leicht und Schlank**

Mit seinem ergonomischen, leichten Design macht dieses Handstück die Behandlung für den Anwender viel komfortabler und für den Kunden angenehmer, besonders für kleine Areale.



**FACIAL TIP -
Präzise Behandlungen**

Behandeln Sie ganz einfach Bereiche, die normalerweise schwer zugänglich sind, wie Ohren, Nasenlöcher und Augenbrauen.

Plattform Vorteile



4 cm² SPOTGRÖSSE FÜR
SCHNELLE BEHANDLUNGEN



ICE PLUS™
ZWEIFACHE KÜHLUNG



ZWEI ANSCHLÜSSE



SMART CLINIC
DATENAUSWERTUNG



KLINISCH BEWÄHRTE 3D TECHNOLOGIE



INTUITIVER, BENUTZERFREUNDLICHER
GROSSER BILDSCHIRM (15 ZOLL) MIT
VOREINGESTELLTEN PARAMETERN



FÜR ALLE HAUTFARBEN UND
LEICHT GEBRÄUNTE HAUT



KEINE VERBRAUCHSARTIKEL



"

Soprano Titanium ist der schnellste und gründlichste Laser zur Haarentfernung, mit dem wir je gearbeitet haben. Die Behandlung ist für unsere Patienten wie auch für uns als Anwender sehr angenehm und die Ergebnisse sind schon nach wenigen Sitzungen exzellent.

"

*Prof. Dr. med. habil Jörn Elsner,
Hautarztpraxis Prof. Dr. med. Jörn Elsner, Bremen*






Smart **Clinic**

Managen Sie Ihr Institut. Maximieren Sie Ihr Potential.

Smart Clinic ist eine bahnbrechende, cloud-basierte Anwendung, die über eine App und Online-Plattform einen kontinuierlichen Zugriff auf Live-Daten bietet. Sie ermöglicht einfach und nahtlos eine bessere Verwaltung und Anwendung Ihrer Systeme, da sie den Echtzeitstatus von Plattformen, Handstücken und Produktivität widerspiegeln, so dass Sie ohne Zeitverlust auf Daten zugreifen und Anpassungen vornehmen können. Smart Clinic treibt die Optimierung und Standardisierung voran und ermöglicht Entscheidungen, die auf echten Daten und Statistiken basieren - nicht auf Schätzungen.

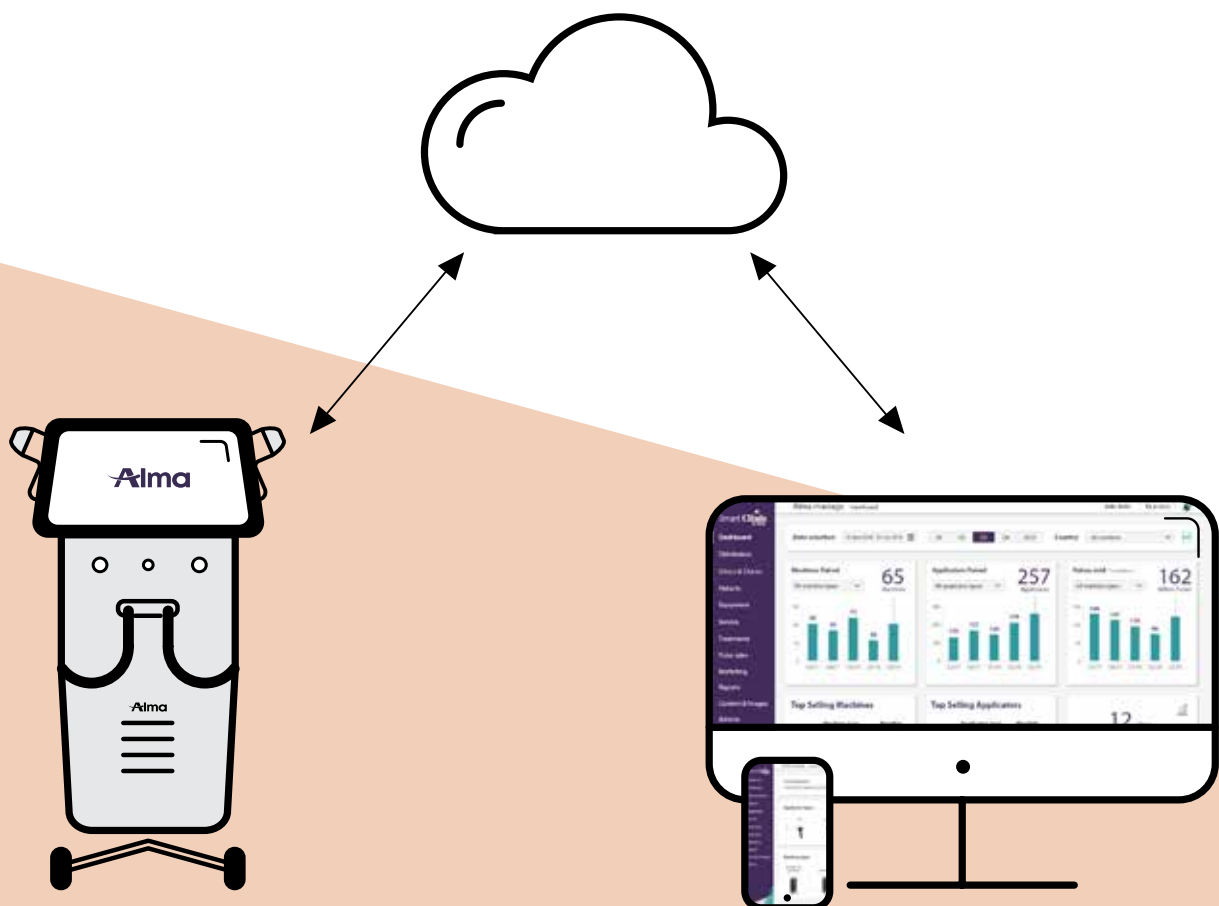



Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die ich mit dem Soprano Titanium erziele. Neben der hohen Effizienz und Sicherheit, die die Basis für jedes Haarentfernungsverfahren bilden, gibt es zusätzliche Funktionen wie die Smart Clinic und das einmalige Quattro-Handstück, womit der Titanium sich von allen anderen Systemen auf dem aktuellen Markt abhebt.



Ärztlicher Direktor Dr. med. Pablo Naranjo,
Elite Laser Clinic & Laser Unit am NISA Krankenhaus, Madrid, Spanien



Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99
Email: info@alma-lasers.de

www.almasoprano.de

© 2019 Alma. Alle Rechte vorbehalten. Alma, das Alma Logo, Soprano Titanium, Quattro, ICE Plus, Smart Clinic, SHR und Speed sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Alma Lasers Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.



FOLGEN SIE
ALMA LASERS

